

انواع پروتزهای آلت تناسلی

و

روش های کاشت آن ها


- Semi Rigid Penile Implant,
- Cable Free Penile Implant,
- Inflatable Penile Implant,
- Metoidioplasty Semi Rigid Penile Implant,
- Phalloplasty Semi Rigid Penile Implant,
- Phalloplasty Inflatable Penile Implant,

ZSI, Geneva, Switzerland




Robina
Group Companies

SEMI-RIGID ZSI100

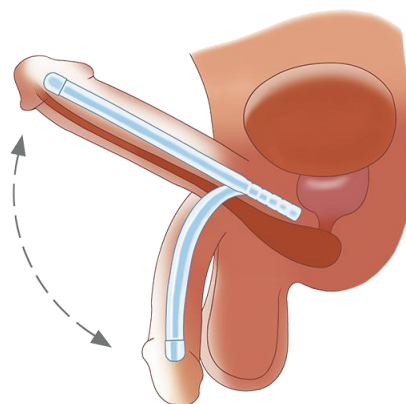

SEMI-RIGID ZSI100

دارای روکش PVP برای مبارزه با عفونت می باشند.

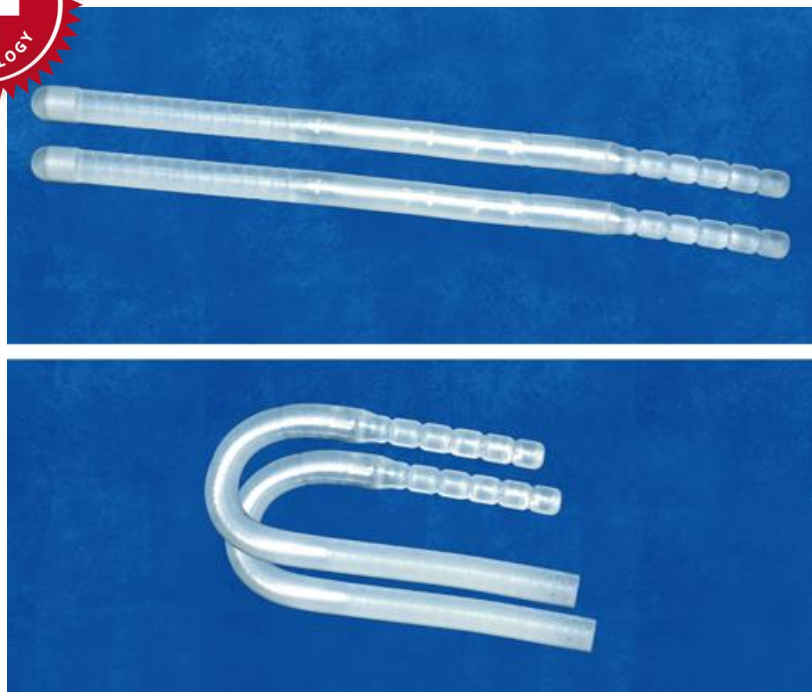


SEMI-RIGID ZSI100

Functioning




1. flacid penis

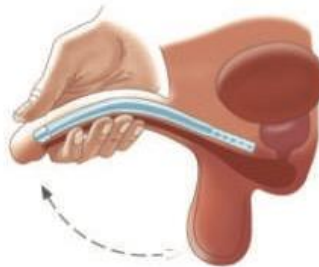

2. With a hand, straighten the penis from bent position.



3. Erect penis

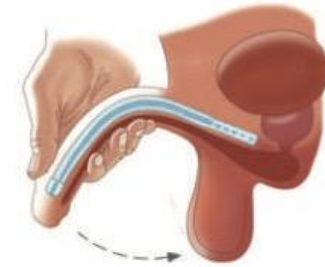

4. With a hand, return the penis to bent position

Few infections, few mechanical failures


Made of silicone
With bendable Silver cable inside



SEMI-RIGID ZSI100


Indications:

- Patient with **organic erectile dysfunction and Peyronie's disease**
- Patient **unable to use the pump** of the inflatable penile implant
- Patient **requiring easy procedure (requiring short anaesthesia)**
- Patient **refusing risk** of adverse events or mechanical failure of inflatable penile implant
- Patient **unable to pay for an inflatable penile implant**

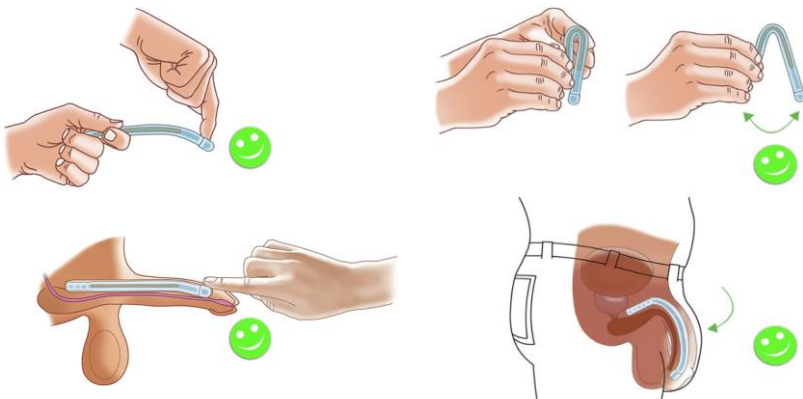


- شکل پذیری عالی دارد و به راحتی در لباس قرار می گیرد.
- ZSI 100 دارای یک قسمت انعطاف پذیر است که بیشترین راحتی را برای آلت در هنگام استراحت فراهم می کند.
- دو سیلندر ZSI 100، استحکام و مقاومت عالی را ایجاد می کند.
- ZSI 100 در زمان استراحت و در زمان نعوظ موثر است.

SOFT – Cable Free ZSI 100 CF

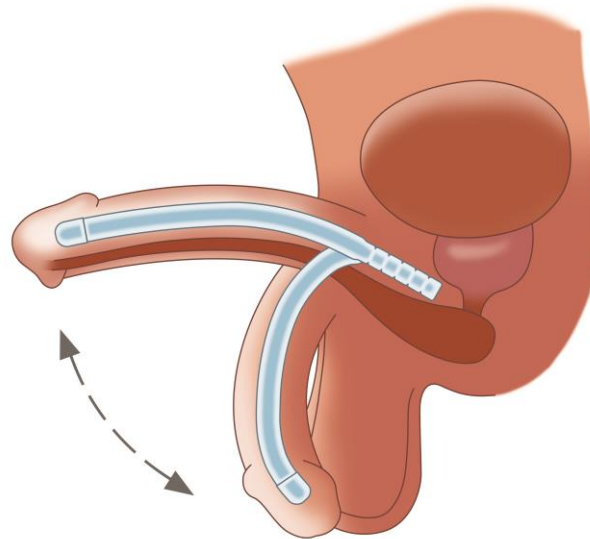

SOFT – Cable Free ZSI 100 CF

دارای روکش PVP برای مبارزه با عفونت می باشند.


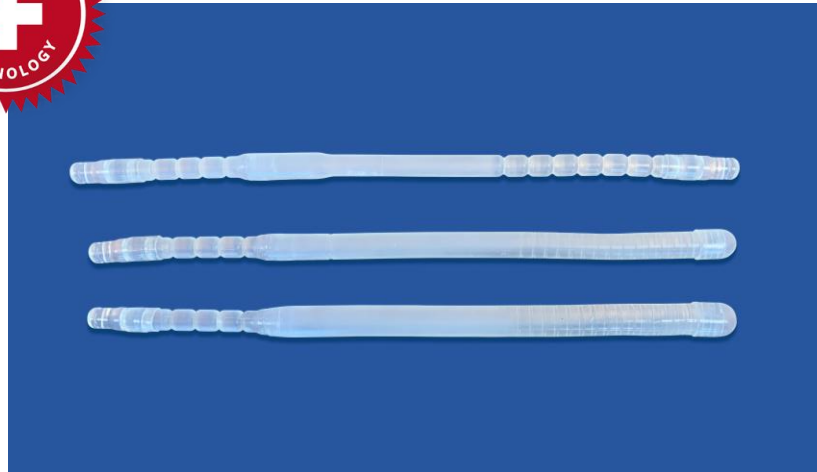


SOFT – Cable Free ZSI 100 CF


Indications:

1. After infection or erosion of an inflatable or semi-rigid penile implant
It keeps the space in CC

2. Spinal Cord Injury or neurogenic patients with Erectile dysfunction
Lower risk of erosion and infection

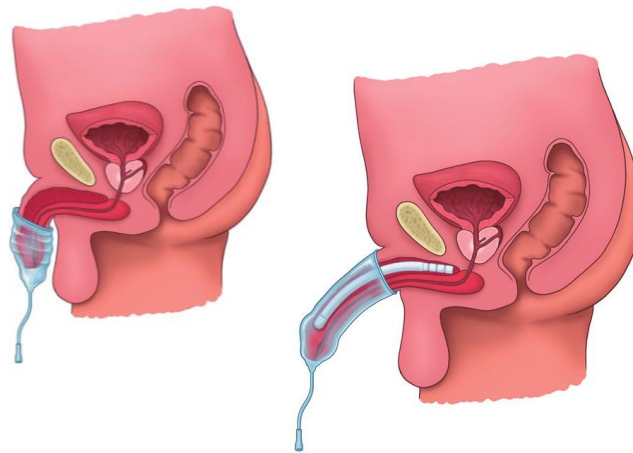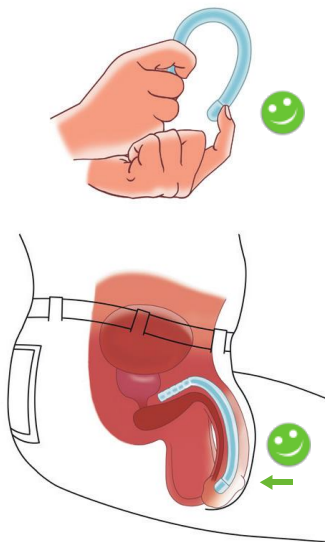


Help to maintain penile sheath
over the penis

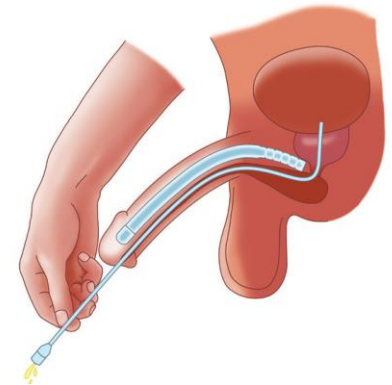


Easier
catheterisation


SOFT – Cable Free ZSI 100 CF

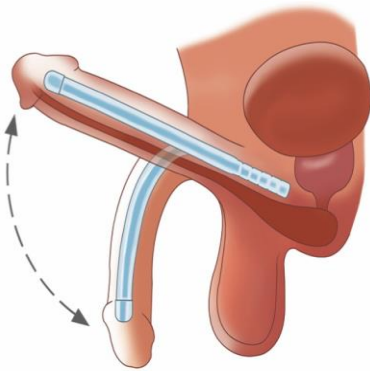

Flexible

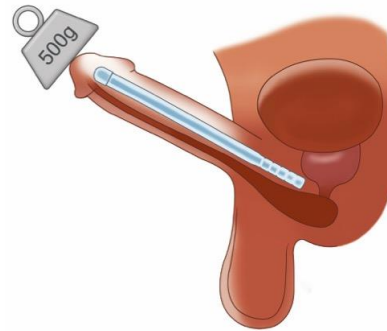


Possibility of sexual intercourse

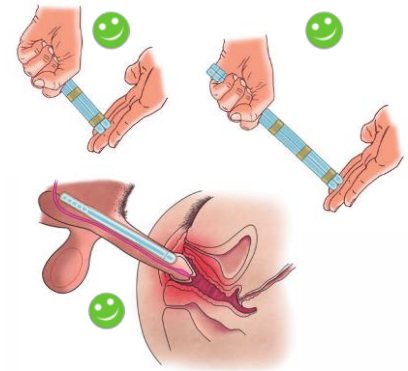


Few infections, few erosion, NO mechanical failures, more comfortable

Made of silicone
Flexible, without any cable inside

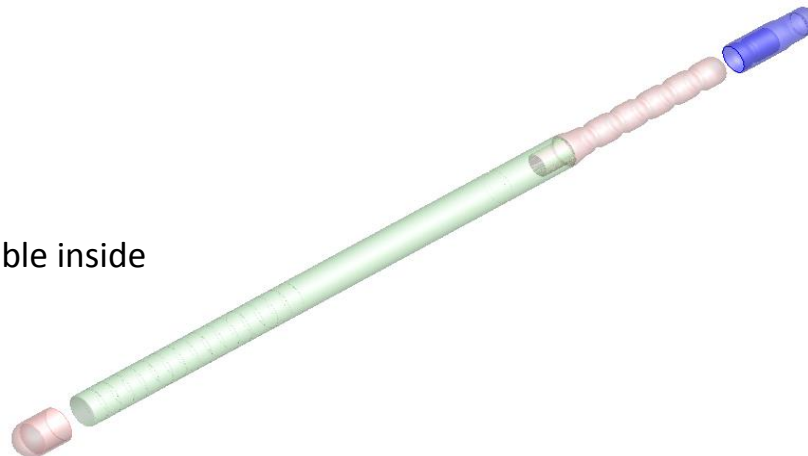

INFLATABLE ZSI 475

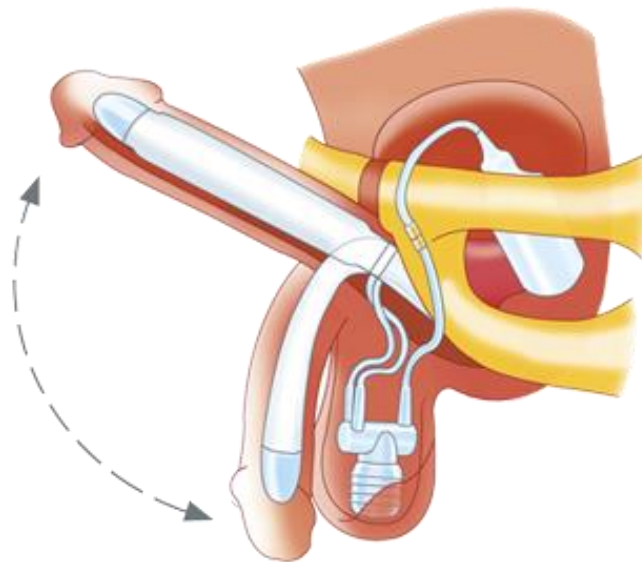

INFLATABLE ZSI 475


دارای روکش PVP برای مبارزه با عفونت می باشند.



INFLATABLE ZSI 475


INDICATION

- **Patient with organic erectile dysfunction and Peyronie's disease**
- **Patient able to use the pump** of the inflatable penile implant
- **Patient accepting risk** of adverse event and mechanical failure
- **Patient able to pay** for an inflatable penile implant

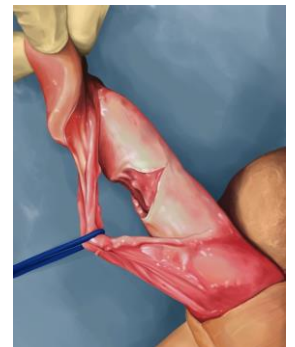


INFLATABLE ZSI 475


Functioning

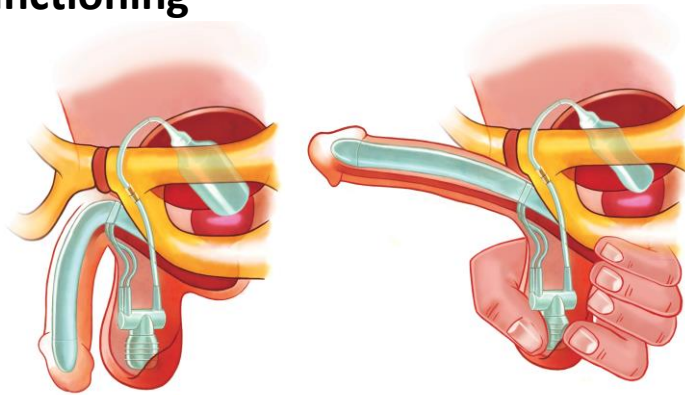

Inflation

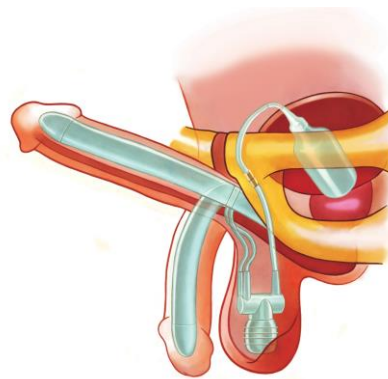

Erection

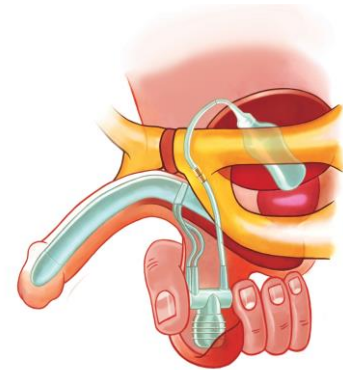

Deflation

3-LAYER CYLINDERS


Bigger penile when implanted with **Better rigidity**

- Reducing the risk of piercing the inner layer
- Resistive against multiple folding
- Resistive against to strong pressures, (blowing resistance > 3.3bar)
- Low risk of buckling
- 100% BIOCOMPATIBLE SILICONE
- PVP hydrophilic coating (will absorb the antibiotic, the surgeon chooses to use)
- SAFE IN MRI AND AIRPORT SCANNERS



All standard lengths of penile implant & accessories are available in one box

ZSI 100 FTM MALLEABLE PENILE IMPLANT

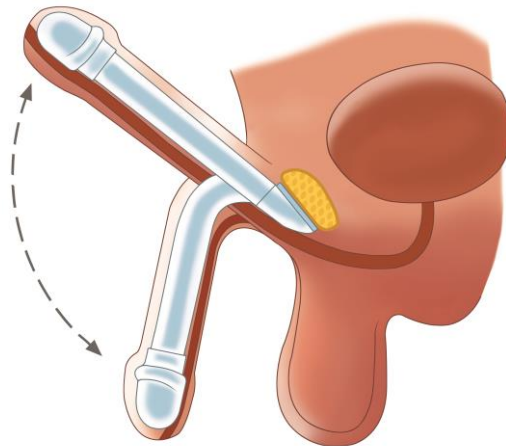

ZSI 100 FTM MALLEABLE PENILE IMPLANT

ZSI offers solutions adapted for plastic surgery to satisfy the specific demands of transsexual / transgender men and women



Passage for urethra




TOTAL LENGTH: 200 mm that can be reduce to 130 mm

WIDE: 20 mm, Glans 22 mm

BASE: 25 x 20 mm with 6 holes


دارای روکش PVP برای مبارزه با عفونت می باشند.

**1 cylinder
designed for
life like erection**

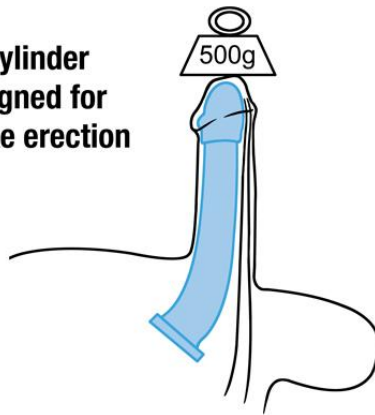


ZSI 100 FTM MALLEABLE PENILE IMPLANT

Functioning

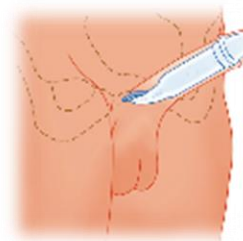

ZSI 475 FTM
Hydraulic penile implant

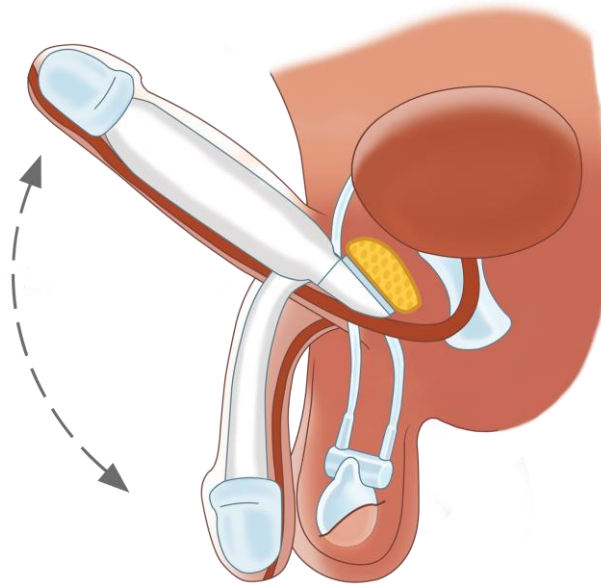


ZSI 475 FTM Hydraulic penile implant




Base with a square shape to fix the prosthesis to the pubic bone
One glans: smooth and large
Structure inside to reduce the fold in flaccid position
Tubing exit is in good direction to the scrotum
Glans look like a glans with a passage for urethra
Good angle in erected position
Large diameter of 22 mm


Functioning

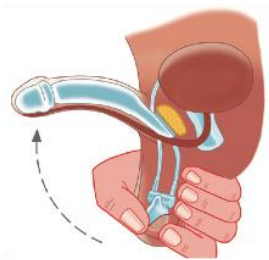

1. Press the bulb to inflate the prosthesis.

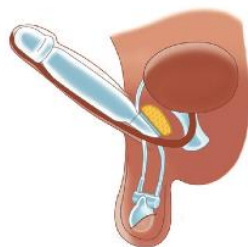

2. Penis erected.

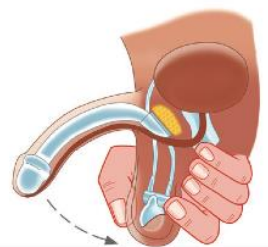

3. Press the cylinder to deflate the prosthesis.



4. Penis flaccid.

Thank you for your attention



Robina
Group Companies

Exclusive Agent
Tehran, Iran

+98 21 440 25 495

+98 21 440 25 207

www.robina-persia.ir
www.urologic.ir